

ORTH ORIGINAL

Systeme d'extraction de cupule

Pour une extraction rapide et une conservation du capital osseux



Chirurgies de révision de la hanche



Extraction de cupules non cimentées



Préserve le capital osseux du patient



Nombre de composants optimisé

Montage simple et rapide


Gain de temps opératoire



www.orthoriginal.bzh

Système d'extraction de cupule

Têtes hémisphériques

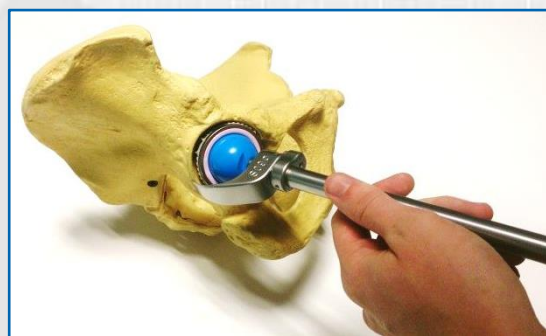

Boîte avec couvercle

Lames d'ébauche et de finition

Têtes sphériques



Pour une cupule avec ...

Mesureur pour cupule

Manche universel



... ou sans insert.

Têtes sphériques

- Pour utilisation dans une cupule où on ne souhaite pas retirer l'insert (céramique par exemple)
- Tailles : Ø22, Ø28, Ø32, Ø36

Têtes hémisphériques

- Pour utilisation dans une cupule où l'insert a été extrait
- Tailles : de Ø33 à Ø49 (incrément 2mm)

Lames amovibles

- Deux lames (ébauche et finition) par taille de cupule
- Tailles : de Ø44 à Ø60 (incrément 2mm)

Manche

- Manche universel sur lequel s'adapte toutes les têtes et toutes les lames.

Mesureur

- Permet de mesurer le diamètre de la tête fémorale et de la cupule à extraire.

Contactez nous pour la liste des références

Pour toute demande d'information :



Tél. : +33 (0)2.23.35.53.40 contact@orthoriginal.bzh
Fax : +33 (0)2.23.35.16.35 www.orthoriginal.bzh

Orthoriginal, 44C Rue de Bray
35510 Cesson-Sévigné, France

